




PRESSALIT®

Article Numéro article	PLUS support de lavabo avec levier de commande, réglable en hauteur à verin à gaz et réglable latéralement manuellement R4680
Description	VVS: 654002200 NRF: 6132533 RSK: 7972591 EAN: 5708590309446 HMI: 71757 NBS: N13:30,335 FDA: ILW/D142473  PLUS supports de lavabo sont disponibles en versions réglables en hauteur électriquement, pneumatiquement et manuellement. Ils peuvent être montés sur le mur ou sur PLUS glissière-supports de Pressalit. PLUS support de lavabo par compensation à gaz, réglable en hauteur de 300 mm par levier de commande positionné sur le côté du lavabo. Le levier de commande peut servir de porte-serviettes. Le levier peut être placé à droite ou à gauche du lavabo. Pour lavabos de 16-22 kg. Flexibles R2064/R2065/R2067 recommandés. Matériaux : aluminium, matière synthétique. Avec fixations pour lavabo. Pour équipement de PLUS glissière-support horizontale (non comprise)
Réglage Hauteur de réglage	Réglable en hauteur et latéralement 300 mm

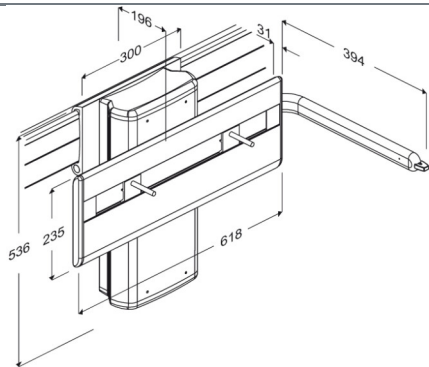

PRESSALIT®

Article Numéro article	PLUS support de lavabo avec levier de commande, réglable en hauteur à verin à gaz et réglable latéralement manuellement R4680
Capacité du produit	Charge maximale admissible : 135 kg. Convient pour des lavabos jusqu'au 22 kg. Lorsque le lavabo est chargé de 135 kg, chaque vis de montage est chargé de 30 kg. <i>Le support de lavabo doit être en mesure de supporter le poids du lavabo ainsi que le poids d'une personne s'appuyant dessus pendant sa toilette ou s'en aidant pour se relever quand elle est assise.</i> Ni le lavabo ni le support de lavabo ne sont conçus pour porter ou transporter le poids d'une personne, et les méthodes de test applicables au support de lavabo reflètent les exigences suivantes : La norme ISO 17966 prescrit un test statique sur le bord avant du lavabo chargé à 75% du poids maximal de l'utilisateur. <i>Par exemple : pour une charge maximale admissible du support annoncée à 135 kg avec un lavabo de 22 kg, selon la norme ISO 17966, cela équivaldrait à un utilisateur pesant 151 kg qui se pencherait sur le bord avant du lavabo.</i>
Matériaux Ergonomie Fonctions	Le support de lavabo est principalement composé d'aluminium anodisé 10 microns. Les extrémités du support sont recouvertes de pièces de finition en polymère ABS. Le support de lavabo convient à tous les types de lavabos avec fixation par boulons. Arrondi et fin, le design facilite le nettoyage. Le support de lavabo est livré avec un levier de commande, qui peut aussi servir de porte-serviette. Le levier peut être placé à droite ou à gauche du lavabo Par défaut, le support de lavabo est livré avec un système de compensation à gaz pour lavabos de 16-22 kg, mais il est disponible également avec système de compensation à gaz pour lavabos de, respectivement, 8-12 kg et 12-16 kg.
Garantie	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.



PRESSALIT®

Article Numéro article	PLUS support de lavabo avec levier de commande, réglable en hauteur à verin à gaz et réglable latéralement manuellement R4680
Nettoyage	Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore, car cela pourrait endommager la surface. Les nettoyants suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont dilués conformément aux indications notées sur l'emballage. NETTOYANTS DÉSINFECTANTS : Sufanios Premium Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé. DÉTARTAGE DE L'ALUMINIUM : Pressalit recommande d'enlever le tartre à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution de 3 volumes de vinaigre pour 7 volumes d'eau et de sécher avec un chiffon rincé à l'eau claire et bien essoré.
Déclaration de conformité	Ce produit répond aux exigences propres à : - la réglementation (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux - la directive 2006/42/CE du Conseil sur les mécanismes

pressalit.com

PRESSALIT®